

INSTALLATION

(Weitere Informationen zu Einstellungen sind auf der Rückseite zu finden)

1) EINLEGEN DER BATTERIEN

- 1.1 Entfernen Sie die Abdeckung des BATTERIEFACHS (10), legen Sie 1 AAA-Batterie für die Uhr und 2 AA-Batterien für den Vibrator/Wecker ein.
- 1.2 Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität, wie im Inneren des Batteriefachs angezeigt.

2) AUSWECHSELN DER BATTERIEN

- 2.1 Wenn der LCD-Bildschirm nicht mehr deutlich angezeigt wird, muss die AAA-Batterie ausgewechselt werden
- 2.2 Wenn die Wecktonqualität oder Lautstärke nachlässt oder nur eine ganz langsame Vibration erfolgt, müssen die Batterien ausgewechselt werden. Ersetzen Sie schwache Batterien so bald wie möglich, um zu verhindern, dass Batterien im Gerät auslaufen.

3) WARTUNG

- 3.1 Wird das Gerät längere Zeit nicht verwendet, nehmen Sie alle Batterien heraus, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- 3.2 Es wird empfohlen, die Batterien für den Vibrator/Wecker (2 AA Batterien) auf Reisen herauszunehmen, damit die Batterien nicht leer werden, wenn unterwegs aus Versehen die Beleuchtungstaste gedrückt wird.

EINSTELLEN VON UHR- UND WECKZEIT

(Abbildungen siehe Rückseite)

4) EINSTELLEN DER UHRZEIT

- 4.1 Halten Sie die Taste TIME SET (2) gedrückt, während Sie die Stundentaste (4) drücken, bis die korrekte Stundenangabe angezeigt wird. Achten Sie dabei darauf, ob es vor oder nach Mittag ist. Für Nachmittag/Abend wird auf dem Display ein „P“ für PM angezeigt (9).
- 4.2 Halten Sie die Taste TIME SET (2) gedrückt, während Sie die Minutentaste (5) drücken, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.
- 4.3 Bitte benutzen Sie den Zeitformat Schalter (12) um zwischen dem 12 Stunden und dem 24 Stunden Format zu wählen.

5) EINSTELLEN DER WECKZEIT

- 5.1 Halten Sie die Taste ALARM SET (3) gedrückt, während Sie die Stundentaste (4) drücken, bis die korrekte Stundenangabe angezeigt wird. Achten Sie dabei darauf, ob es vor oder nach Mittag ist. Für Nachmittag/Abend wird auf dem Display ein „P“ für PM angezeigt (9).
- 5.2 Halten Sie die Taste ALARM SET (3) gedrückt, während Sie die Minutentaste (5) drücken, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.

WECKBETRIEB (Abbildungen siehe Rückseite)

- 6) Stellen Sie die Weckzeit wie unter “Einstellen der Weckzeit”angegeben ein.
- 6.1 Stellen Sie die Taste Alarm ON/OFF (1) auf ON. Oben in der Mitte des Displays wird der Weckerindikator angezeigt (8). Dies zeigt an, dass die Weckfunktion eingeschaltet ist. Der Wecker ist nun gestellt.
- 6.2 Sie können den Weckmodus auf Weckton oder Vibrator bzw. Weckton und Vibrator einstellen. Dazu verwenden Sie die Weckmodustaste (6).
- 6.3 Wenn der Wecker klingelt, kann er mit ALARM OFF (3) ausgeschaltet werden. Der Wecker klingelt am nächsten Tag wieder zur selben Uhrzeit.
- 6.4 Wenn der Wecker klingelt, können Sie auf die Schlummertaste (7) drücken. Dadurch wird er ausgeschaltet, klingelt aber in ca. 4 Minuten erneut. Sie können diesen Zyklus beliebig oft wiederholen.
- 6.5 Um den Wecker permanent auszuschalten, stellen Sie die Taste Alarm ON/OFF (1) auf OFF

Nachtbeleuchtung (Abbildung siehe Rückseite)

- 7) Um im Dunkeln die Uhrzeit zu sehen, drücken Sie die Beleuchtungs-/Schlummertaste (7).

Test taster

- 8) Der Test Taster (11) dient dazu, die Funktion des Summers und des Vibrators zu veranschaulichen, ohne den Alarm einstellen zu müssen. Um den Test Taster zu benutzen schieben Sie bitte den Funktionsschalter in die gewünschte Position, d.h. Summer, Vibrator oder Summer/Vibrator, und drücken Sie den Test Taster.

Made in China
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083
www.SonicAlert.com Gebührenfrei in
Nordamerika: 1-888-864-2446 V/TTY



Français



Pink Camo Modèle SBP100C

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE SONIC ALERT

Le réveille-matin Sonic Boom modèle SBP100C est garanti contre tout défaut de fabrication pièces et main d'œuvre pour un an à compter de la date d'achat du produit. Durant cette période, Sonic Alert s'engage à réparer ou remplacer à notre discrétion l'appareil SBP100C sans frais de votre part. Faites nous parvenir votre appareil par la poste (à vos frais) accompagné d'une copie de votre preuve d'achat à l'adresse suivante :
Sonic Alert inc., 1050 E Maple Road, Troy, Michigan 48083

Réveille-matin Sonic vibreur portatif




INFORMATION GÉNÉRALE

Alimentation : 2 piles AA de 1.5V & 1 pile AAA de 1.5V

Réveille-matin Sonic Alert avec vibreur portatif SBP100

Instructions

Important : Veuillez lire attentivement les instructions qui suivent avant d'utiliser votre appareil, et conservez-les pour vous y référer au besoin.

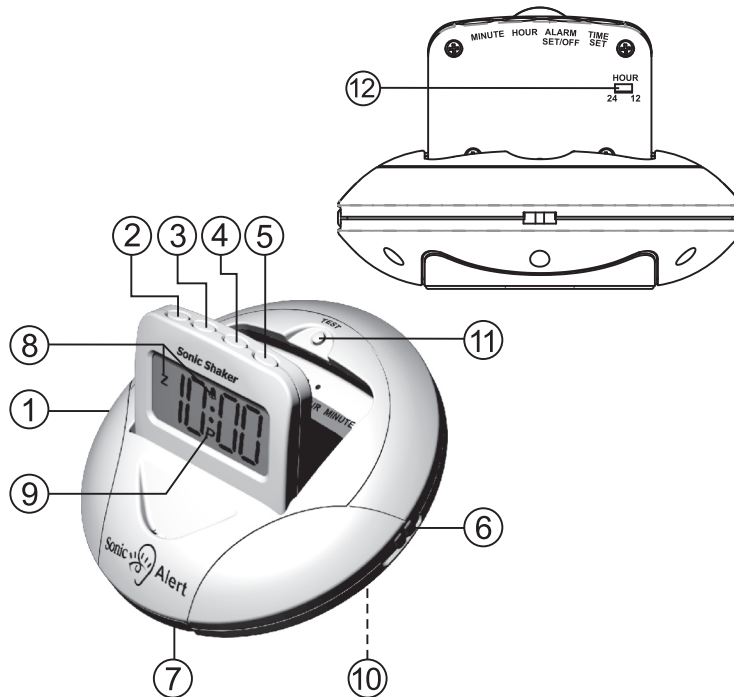

Fonctions :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Bouton d'alarme ON/OFF | 8) Indicateur d'alarme |
| 2) Bouton de réglage de l'heure | 9) Indicateur PM |
| 3) Bouton de réglage de l'alarme | 10) Emplacement des piles |
| 4) Bouton heure (HOUR) | 11) Bouton d'essai(TEST) |
| 5) Bouton minutes (MINUTE) | 12) Sélecteur de format de l'heure |
| 6) Bouton mode d'alarme | |
| 7) Bouton SNOOZE et écran lumineux | |

INSTALLATION

1) COMMENT INSTALLER LES PILES

- 1.1 Enlever le couvercle du compartiment à piles(10), insérer 1 pile AAA pour l'horloge et 2 piles AA pour le vibreur/alarme
- 1.2 Pour insérer les piles, assurez-vous de respecter les polarités telles qu'indiquées dans le fons du compartiment

2) QUAND REMPLACER LES PILES

- 2.1 Lorsque l'écran à cristaux liquides devient faible, il est temps de changer les piles AAA.
- 2.2 Lorsque le son de l'alarme devient faible, que le volume est bas ou que le vibreur est lent, c'est habituellement un indice que les piles sont faibles. Remplacez-les pour éviter tout écoulement dans l'appareil.

3) ENTRETIEN

- 3.1 Si l'appareil est inutilisé pour un certain temps, retirer les piles pour éviter tout écoulement pouvant endommager l'appareil.
- 3.2 Lorsque vos voyages avec l'appareil, il est recommandé de retirer les 2 piles AA du vibreur/alarme pour éviter que les piles ne se vident si le bouton de luminosité de l'écran est enfoncé par mégarde.

AJUSTEMENT DE L'HEURE ET DE L'ALARME

4) AJUSTEMENT DE L'HEURE

- 4.1 Gardez enfoncé le bouton TIME SET(2). Utilisez le bouton HOUR (4) pour régler à l'heure désirée. Attention de bien régler les modes AM et PM. Un « P »(9) apparaîtra sur l'écran en mode PM.
- 4.2 Maintenez enfoncé le bouton TIME SET (2). Utilisez le bouton MINUTE (5) pour régler les minutes.
- 4.3 Veuillez utiliser le sélecteur de format de l'heure (12) pour sélectionner un format d'heure sur 12 ou 24 heures.

5) AJUSTEMENT DE L'ALARME

- 5.1 Maintenez enfoncé le bouton ALARM SET (3). Utilisez le bouton HOUR (4) pour régler l'heure désirée. . Attention de bien régler les modes AM et PM. Un « P »(9) apparaîtra sur l'écran en mode PM.
- 5.2 Maintenez enfoncé le bouton ALARM SET (3). Utilisez le bouton MINUTE (5) pour régler les minutes.

FONCTIONS DE L'ALARME

6) Ajustez l'heure de réveil désirée selon les directives

AJUSTEMENT DE L'ALARME

- 6.1 Mettez le bouton ALARM ON/OFF (1) en position ON. L'indicateur d'alarme apparaîtra en haut au centre de l'écran(8). Ceci indiquera que l'alarme est en fonction. L'alarme est maintenant prête à sonner automatiquement à l'heure désirée.
- 6.2 Vous pouvez choisir le type de sonnerie que vous désirez i.e. sonore (Buzz), vibreur ou sonore/vibreur en positionnant le bouton ALARM MODE (6) à la position désirée.
- 6.3 Lorsque l'alarme est en fonction, pressez ALARM OFF (3) pour l'arrêter. L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure.
- 6.4 Lorsque l'alarme est en fonction, pressez le bouton SNOOZE(7). L'alarme s'arrêtera pour 4 minutes environ puis, sonnera de nouveau automatiquement. Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que vous le désirez.
- 6.5 Si vous ne désirez pas vous servir de la fonction d'alarme, mettez le bouton ALARM ON/OFF (1) en position OFF.

LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

- 7) Pour lire l'heure dans l'obscurité, maintenir enfoncé le bouton LIGHT/SNOOZE (7).

BOUTON TEST

- 8) Le bouton TEST(11) vous permet d'essayer le vibreur et le son de l'alarme, sans même programmer l'heure du réveille-matin. Pour utiliser le bouton test, vous n'avez simplement qu'à régler le bouton de fonction mode d'alarme (6) à la position désirée ex. : son (buzzer), vibreur (vibrator) ou les deux à la fois (buzzer/vibrator) et presser le bouton TEST pour essayer la fonction sélectionnée.

Fabriqué en Chine
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083
www.SonicAlert.com 1-888-864-2446 V/TTY



093-BP100-011